

# ディップコータ DC4015

## 取扱説明書

### 目 次

- [1] 梱包内容
- [2] 概 要
- [3] 特 徴
- [4] 取り付け設置
- [5] 接続配線
- [6] 操作方法
- [7] 製品仕様
- [8] メンテナンス

#### [1] 梱包内容

この度は「ディップコータ DC4015」をお買い上げ頂きまして有り難う御座います。

まずは次の梱包内容をご確認下さい。

1) ディップコータ機構部本体

2) コントロールBOX

接続ケーブル	2 m	1 本
ヒューズ	3 A	1 個
マグネットクリップ		1 個
本書「取扱説明書」		1 冊

## [2] 概 要

本ディップコータは、昇降垂直Z方向に可動軸を持ち  
ステッピングモータで駆動します。

移動操作はパドルスイッチの上下動によって行います。  
昇降スピードは10mm/分～100mm/分にて連続的  
に調整することが出来ます。


## [3] 特 徴

- 1) 小型で1Kg程度の物でも、リモート操作で簡単に  
移動調整出来ます。
- 2) シンプルで頑丈な構造なので移動設置が簡単です。  
巾130mm、奥行き206mm、高さ277mm
- 3) メンテのやり易い構造です。

## [4] 取り付け設置


- 1) 機構部本体は丈夫な水平面に設置して下さい。  
また、4本のM6ねじによって、テーブル等に固定する  
ことが可能です。
- 2) 機構部とコントロール BOX の接続ケーブルは2mで  
す。コントロール BOX は機構部を監視出来る場所に設  
置して下さい。

## [5] 接続配線

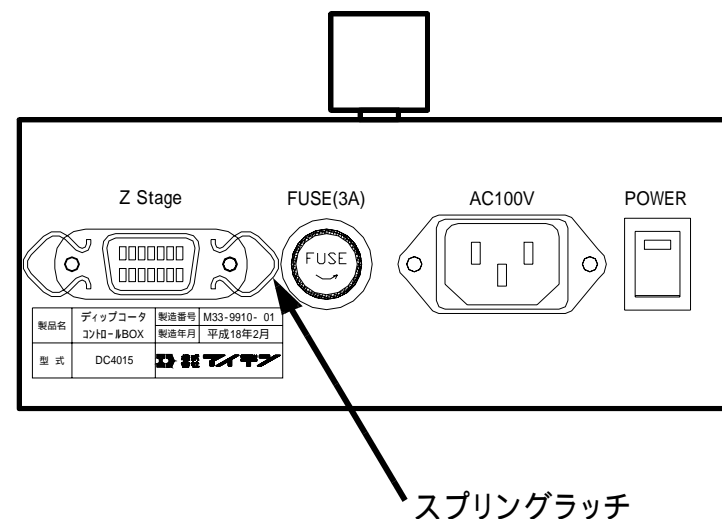

- 1) 電源ケーブルをコンセントに差し込んで下さい
- 2) 接続ケーブルをコネクタに接続して、スプリングラッチ  
で確実に固定して下さい

## [ 6 ] 操作方法

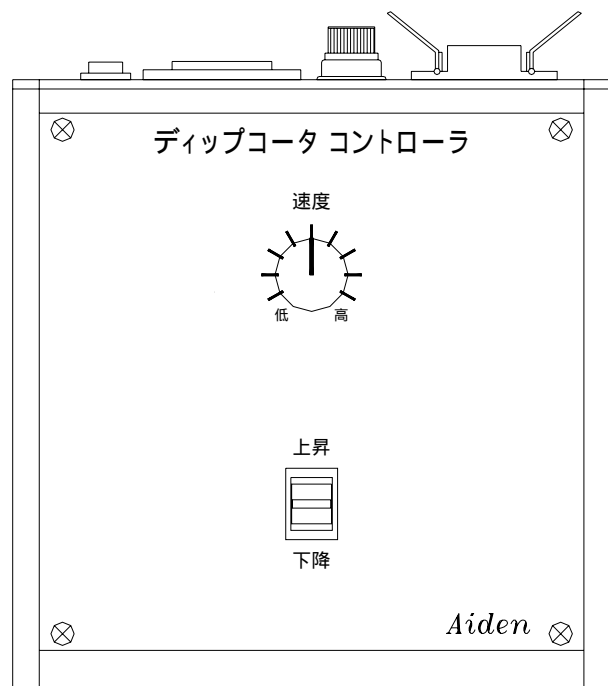

### 1) ワークの設置

アーム先端の4本のM3ねじを緩め、ワークを挟み込み、ねじで固定します。

固定可能なワーク寸法は、幅 25mm, 厚さ 5mm です。

簡易的な固定用としてマグネットクリップを付属していますので、ご利用下さい。

### 2) 操作


アームを動かす時は、スイッチレバーを上、下に動かします。

( SPEED ボリュームにより最大スピードを可変出来ます。 )

位置を微調整するときは、 SPEED ボリュームを「低」にして、スイッチレバーでイン칭ングして下さい。

スイッチの1アクション(スイッチを素早く ON-OFF した場合)のテーブルの移動距離は0.01 mm 以下です。

## [ 7 ] メンテナンス

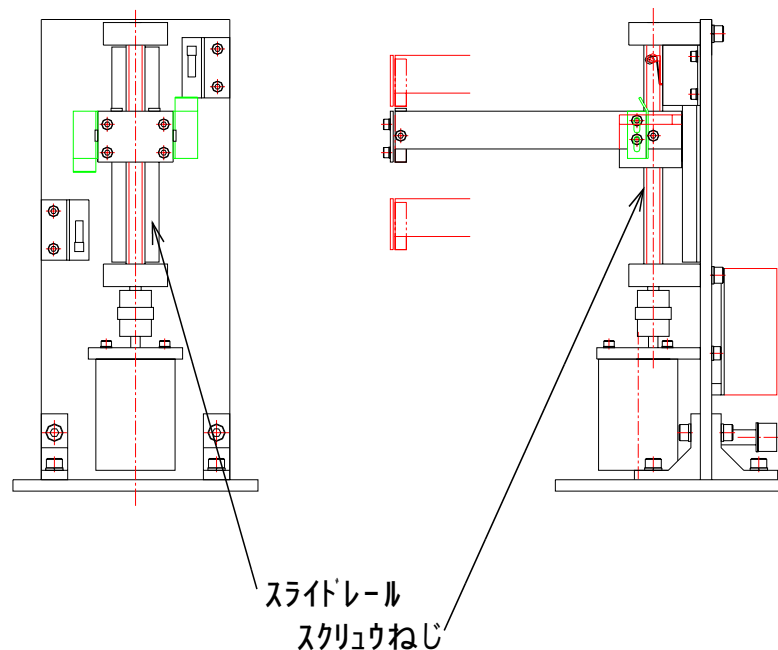

### 1) スライドレール

スライドレールには異物が入らないように、注意して下さい。異物が入った場合は取り除き、また埃等は乾いた布で拭き取して下さい。

### 2) スクリューねじ

スクリューねじにはあらかじめグリスが塗布されていますが、使用頻度によっても異なってきますが、おおよそ1年に1度程度グリスの塗布をして下さい。

塗布推奨グリス : リチウム系グリス2号

例: アルバニアグリスNo. 2 (昭和シェル石油)

## [ 8 ] 製品仕様

### 1) 外形寸法 :

巾130mm、奥行き206mm、高さ277mm

### 2) ワーク固定具寸法 : 幅40mm × 高さ30mm

### 3) 材料 : アルミ6mm厚

### 4) 可動範囲 : 100mm

### 5) 移動スピード : 0.16mm/秒 (10mm/分) ~ 1.67mm/秒 (100mm/分) ~

(手動可変: ボリュームによりスピードを可変出来る。)

### 6) 精度 : ±1mm以下

### 7) 負荷重量 : 1Kg以下

### 8) 全体重量 機構部 : 約1.8Kg

コントロールBOX : 約1Kg

### 9) 電源電圧 : AC100V 60/50Hz

製造元



〒651-2228 神戸市西区見津が丘2丁目2-3

TEL : 078-994-1400 FAX : 078-994-1462

ホームページ : <http://www.aiden.com>

E-Mail : [info@aiden.com](mailto:info@aiden.com)

資料No. ID33-40100002 ( 2006 . 02 . 24 )